

KaVo INTRA LUX® KL 701

Un moteur Turbo.



KaVo. Dental Excellence.

Petit mais turbo!



Longueur de l'ancien modèle : 54,4 mm
Longueur du KL 701 : 46 mm !

8,4 mm

Le KaVo INTRA LUX KL 701, il n'y en a pas deux comme lui. D'abord parce qu'il est le plus petit moteur dentaire au monde. Comparé à son prédécesseur le KL 700, il en présente les mêmes caractéristiques techniques sauf qu'il est plus court de 8,4 mm, ce qui, en pratique, s'avère un précieux avantage pour l'utilisateur.

Ce nouveau moteur a un couple de 2,7 Ncm et sa vitesse de rotation (avec un couple généreux quelle que soit la vitesse) va de 2 000 à 40 000 tours par minute. Avec sa forte puissance, il n'a besoin que de très peu d'air de refroidissement, c'est là un moteur très silencieux.


Le KL 701 : L'évolution signée KaVo.

- Un moteur très résistant à l'usure (sans collecteur)
- Système antireflux empêchant la réaspiration de l'eau de spray (contaminée)
- Moins de 100 g !
- Peu gourmand en air de refroidissement et donc très silencieux.
- Roulements à billes remplaçables
- Bobinage breveté
- Vitesse de rotation comprise entre 2 000 et 40 000 tours/min.
Couple maxi : 2,7 Ncm



Court par sa taille, long par sa durée de vie !


L'INTRA LUX KL 701 étant sans collecteur, vous avez là un moteur très résistant à l'usure, qui vous durera longtemps, très longtemps. Le rotor est constitué d'un aimant bipolaire, et le stator d'un bobinage triphasé. Ce qui veut dire : pas de charbon à changer (une opération coûteuse en temps et en argent). L'incroyable longévité du KL 701 s'explique aussi par la robustesse de sa construction. Devant une telle longévité, rien d'étonnant à ce que KaVo vous le garantisse 3 ans !

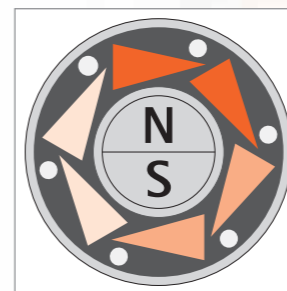

Le principe de fonctionnement de ce nouveau moteur sans collecteur.



Avec l'INTRALUX KL 701, vous disposez d'un ensemble "moteur + contre-angle/pièce à main + cordon rotatif élastique" parfaitement équilibré, d'où une meilleure maniabilité sur le terrain.

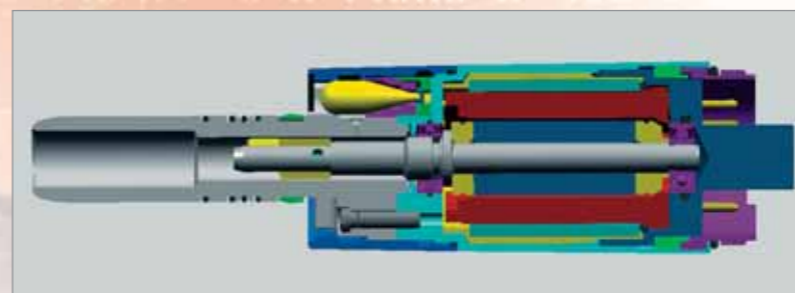

L' INTRA LUX KL 701 c'est aussi une longévité hors pair. D'où la garantie KaVo de 3 ans.

KaVo INTRA LUX® KL 701

Mat.-Nr. 1.004.1329 03/03 fr. Sous réserve d'éventuelles modifications techniques. Les couleurs rendues sur le catalogue peuvent montrer une légère différence par rapport au teintier. © Copyright KaVo Dental GmbH.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com