

KaVo PROTHe Plus® evo.

De vrais "plus"
pour l'utilisateur.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo PROTHE Plus®evo.

Nouveau design.

Nouvelles caractéristiques fonctionnelles.



très attractifs tant par leur esthétique (formes et coloris) que par leurs qualités techniques et d'hygiène.

Le KaVo PROTHE Plus®evo est un articulateur innovant. Pour ce nouvel articulateur, les chercheurs KaVo ont mis l'accent sur une optimisation de l'esthétique en vue de l'obtention de caractéristiques fonctionnelles plus performantes.

Le résultat : une nouvelle gamme d'articulateurs (KaVo PROTHE Plus®evo)

Les "plus" que vous offre un KaVo PROTHE Plus®evo (articulateurs "nouvelle génération"):

- une précision parfaite, aussi synonyme de rentabilité économique
- Une présentation "convaincante" de votre réalisation prothétique au patient
- Une maniabilité hors pair.

Un articulateur qui met en valeur votre travail.

Qualité de la présentation de vos travaux au patient

La précision, la qualité d'exécution du travail prothétique sont essentiels, certes. Mais la qualité de la présentation du travail terminé au patient l'est presque tout autant. Cet aspect décisif, KaVo l'a placé au premier rang de ses préoccupations lors de la conception de cette nouvelle gamme d'articulateurs.

Les surfaces mates argentées du KaVo PROTHE Plus®evo mettent en valeur sa superbe esthétique et, avec elle, ses qualités d'hygiène au cabinet dentaire comme au laboratoire.

Présentés au patient avec un KaVo PROTHE Plus®evo, vos travaux sont mis en valeur !

Ces nouveaux articulateurs permettant un réglage plus précis des différents paramètres, vous aurez moins de retouches occlusales à effectuer lors de la mise en bouche. Or, faire des retouches, vous le savez, c'est souvent compliqué et ça prend du temps, surtout avec les nouveaux matériaux esthétiques comme la céramique par exemple.

Avec ses échelles graduées "grand format" le KaVo PROTHE Plus®evo permet un réglage nettement plus précis, d'où une meilleure qualité de précision au niveau du résultat et, par voie de conséquence, une baisse de vos coûts.



L'élégance et le design des nouveaux KaVo PROTHE PLUS®evo garantissent un travail.



Des graduations "grand format" garanties d'un réglage optimal de l'articulateur.



Utilisé avec l'arc facial électronique KaVo ARCUS®digma, l'articulateur KaVo PROTHE Plus®evo se traduit par une efficacité et une précision inégalées.



Un articulateur précis jusques aux moindres détails: verrouillage centré (acier inox) sans le moindre jeu, d'où une occlusion statique parfaite.

Efficacité à l'utilisation.

Manipulation et entretien faciles.

Cette nouvelle génération d'articulateurs "KaVo PROTHE Plus®evo" offre à l'utilisateur une maniabilité hors pair et inédite. Les améliorations apportées dans ce domaine et dans celui de l'entretien sont issues de recherches approfondies avec des prothésistes et des praticiens du monde entier. Elles concernent le poids de l'articulateur (léger), ses surfaces (lisses) et son réglage (facile et sans outils).

Le KaVo PROTHE Plus®evo: Que vous soyez praticien ou prothésiste, vous apprécierez sa légèreté.



(Travail prothétique représenté: cabinet dentaire: Dr. Kaiser-Wetzer, laboratoire: Thiel)



Un poids plume

Le nouveau concept à la base du KaVo PROTHE Plus®evo et l'optimisation des matériaux qui le constituent font de lui un articulateur léger, jusqu'à 15% plus léger que certains autres modèles d'articulateur. Une légèreté qui le rend d'autant plus maniable.



Design

De par sa forme, le KaVo PROTHE Plus®evo permet différentes positions de travail et peut de ce fait, aussi être utilisé pour la confection de prothèses complètes.

Facilité d'entretien

Les surfaces du KaVo PROTHE Plus®evo étant parfaitement lisses et comportant bien moins d'angles vifs que d'autres articulateurs, les qualités de séparation avec le plâtre, entre autres, sont excellentes. Et l'entretien de l'articulateur bien plus facile.

L'ARCUS®

Cet arc facial permet de transférer la position du maxillaire en relation centrée sur l'articulateur directement.

KaVo Split-Cast et 3PS

Le PROTHE Plus®evo est disponible aussi bien avec le système "Split-Cast PROTHE Plus®" qu'avec le tout nouveau système "3PS" (système 3 points).

Les nouveaux socles (inox) de montage des modèles dans l'articulateur ne prennent pas de place, ils sont un système de fixation magnétique et sont réutilisables à l'infini.

Un système qui a fait ses preuves dans le monde entier

Le Split-Cast KaVo – une double base engrenée de haute précision – vous permet de remettre au praticien les modèles avec le travail prothétique réalisé sans devoir lui remettre l'articulateur. Vous n'avez donc pas à vous séparer de votre précieux outil de travail.

3PS

Il s'agit de nouveaux socles métalliques avec système de fixation magnétique et pouvant être complétés pour le laboratoire.



Les systèmes enregistreurs nouvelle génération

Un arc facial encore plus performant: KaVo ARCUS®digma.



ARCUS®

ou l'enregistrement de la position du maxillaire en moins de 3 minutes.

En à peine 3 minutes en effet, l'ARCUS® enregistre de façon efficace et rationnelle la position du maxillaire par rapport à l'axe charnière (arbitraire ou individuel), excluant ainsi tout défaut occlusal, notamment en cas d'augmentation ou de diminu-

tion de la hauteur d'occlusion.

Ce qui permet de procéder sans erreur à la mise en articulateur directement au cabinet dentaire et ce, sans devoir recourir à d'autres instruments..

ARCUS®digma

ou moins de 5 minutes pour une analyse cinématique complète.

Le système de mesure électronique de l'ARCUS®digma constitue une nette avancée technique pour les cabinets dentaires car avec lui, moins de 5 minutes pour enregistrer par procédé ultrasonique et sans contact l'ensemble des paramètres nécessaires à la programmation du KaVo PROTHE Plus®evo, un articulateur entièrement

programmable.
Paramètres réglables :
• fonction arc facial intégrée
• pente condylienne
• angle de Bennett
• mobilité latérale (jeu articulaire)
• angle de shift (mouvement côté travaillant)
• rétrusion
• guide antérieur/canin

Les très pratiques accessoires synonymes de grande polyvalence du KaVo PROTHE Plus®evo:



Tige incisive P (réglage 5/100)



Tige incisive T (prothèse complète)



Positionneur de modèle supérieur pour technique APFnt



Indicateur d'inclinaison d'occlusion (pour prothèse complète de type APFnt)



Table incisale réglable pour reconstructions dans le secteur antérieur



Pour l'enregistrement de l'arc gothique: enregistrement intraoral



KaVo LOGIcase: la solution efficace pour vos transports entre le cabinet dentaire et le laboratoire



Une gamme d'articulateurs convaincante toute la ligne...

Du modèle de base PROTHE Plus®evo 2 au modèle haut-de-gamme spécial gouttières (PROTHE Plus®evo 9), la gamme des KaVo PROTHE Plus®evo est convaincante sur toute la ligne...

Une qualité qui se voit dans les moindres détails. Quel que soit le modèle de PROTHE Plus® que vous choisissiez pour votre laboratoire ou cabinet dentaire,

tous sont en effet synonymes de qualité, rentabilité, fonctionnalité et design de haut niveau.

Cette nouvelle génération d'articulateurs permet à chaque utilisateur de disposer pour chaque application spécifique d'un articulateur parfaitement adéquat. La partie inférieure est la même pour tous les PROTHE Plus®evo.






La partie supérieure, elle, est spécifique au domaine d'utilisation. Le système axial centré "KaVo Split" permet de la remplacer par une autre.

Un "plus" pour l'utilisateur.

Les articulateurs PROTHE Plus®evo offrent un vrai "plus" tant au niveau de la qualité du résultat que de la rentabilité.

Profitez vous aussi de ces "plus"! Des "plus" synonymes d'amélioration des performances de votre cabinet dentaire/laboratoire de prothèse.

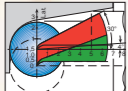

| | Ecole | | Non adaptable | | adaptable | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |
| | PROTHE® Plus evo 2 | PROTHE® Plus evo 3 | PROTHE® Plus evo 5 | PROTHE® Plus evo 5B | PROTHE® Plus evo 7 | PROTHE® Plus evo 9 |
| Pente condylienne sagittale  | Fixe 30° (plan de Camper) 45° (plan de Francfort) | Fixe 30° (plan de Camper) 45° (plan de Francfort) | Réglable de -10° à 90° (plan de Camper) de -25° à 75° (plan de Francfort) | Réglable de -10° à 90° (plan de Camper) de -25° à 75° (plan de Francfort) | Réglable de -10° à 90° (plan de Camper) -25° bis 75° (CE) (plan de Francfort) | Réglable de -10° à 90° (plan de Camper) -25° bis 75° (CE) (plan de Francfort) |
| Angle de Bennett (horizontale)  | Fixe 15° | Fixe 15° | Fixe 15° | Réglable 0 - 30° | Réglable 0 - 30° | Réglable 0 - 30° |
| ISS  | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 1,5 mm | 0 - 1,5 mm |
| Angle de shift  | 0° | 0° | 0° | 0° | option * - 20° bis + 20° | 0° |
| Protrusion | - | - | - | - | Réglable 0 - 1,5 mm | Réglable 0 - 6 mm |
| Retrusion | - | - | - | - | 0 - 1 mm | 0 - 1 mm |
| Distraction | - | - | - | - | 0 - 1,5 mm | 0 - 6 mm |
| Corrections occlusales | importantes | importantes | moyennes | minimales | minimales | importantes |

Présentation

- La qualité de présentation du travail prothétique réalisé est, elle aussi, un critère déterminant pour votre réussite professionnelle.
- Que ce soit lors de l'entretien prothésiste-praticien ou praticien-patient, dans les deux cas les regards se portent fatalement sur l'articulateur.
- De plus, au cabinet dentaire comme au laboratoire de prothèse, un articulateur KaVo PROTHE Plus®evo a une esthétique également synonyme d'hygiène optimale.

Précision

- L'adéquation et la longévité d'une restauration prothétique dépendent dans une large mesure du facteur "précision". Son ajustement sur le die et la qualité d'exécution de sa face occlusale jouent sur ce plan un rôle déterminant.
- Or, la précision de la face occlusale est directement liée à la précision du prothésiste certes, mais aussi à celle de l'articulateur.

Facilité d'utilisation

- Les formes et surfaces d'un PROTHE Plus®evo font qu'on a plaisir à le tenir en main.
- Une esthétique ergonomique – c'est là son originalité.
- A chaque étape correspond un type d'utilisation bien précis de l'articulateur. Avec un PROTHE Plus®evo, la visibilité en linguale est excellente.
- L'extrême fiabilité du système de fixation de la branche supérieure fait que même lorsque les verrouillages centrés sont ouverts, l'articulateur ne se sépare pas.
- Un articulateur garant d'un guidage très précis des mouvements condyliens grâce à des ressorts spécialement conçus à cet effet.

* accessoire 622.1111

KaVo PROTHE Plus®evo.
De vrais "plus" pour l'utilisateur.

KaVo PROTHE Plus® evo.

Mat.-Nr. 1.002.7385 03/05 fr. Sous réserve d'éventuelles modifications techniques. Les couleurs rendues sur le catalogue peuvent montrer une légère différence par rapport au teintier. © Copyright KaVo Dental GmbH.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com